

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://drager.nt-rt.ru> || deb@nt-rt.ru



Новый уровень анестезии

DRÄGER ZEUS®
INFINITY® EMPOWERED

Техника для жизни.

"Есть ли у нас **ПОТЕНЦИАЛ** для достижения **БОЛЬШЕГО?**"

"Да, с использованием анестезии с контролем целевых параметров."



НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ

Современная анестезия сталкивается с важными проблемами и задачами, такими как увеличение потока пациентов, растущие расходы и новые, более сложные процедуры. В этих условиях терапевтические и экономические результаты во многом зависят от надежности, простоты применения и эффективности используемой медицинской технологии.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ

Современная анестезиологическая станция должна предлагать не только высококлассную вентиляционную терапию и возможности мониторинга пациента. Она также должна обеспечить поддержку необходимых периоперационных процессов, таких как подготовка, ведение документации, управление информацией, пред- и послеоперационные процедуры, самотестирование и обслуживание.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ — ЭТО ИНТЕГРАЦИЯ

По-настоящему передовая анестезиологическая станция должна помогать планировать и поддерживать необходимый уровень анестезии с максимально возможной безопасностью, точностью и эффективностью, а также предоставлять доступ к любой необходимой информации. Она должна включать широкие возможности мониторинга и функции, облегчающие принятие своевременных и обоснованных решений. Пожалуй, не менее важны интуитивно понятный интерфейс и простота применения, несмотря на использование передовой технологии.



АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ ZEUS IE – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ

Аппарат Dräger Zeus® Infinity® Empowered (IE) обеспечивает беспроблемную интеграцию нескольких видов оборудования для вентиляции, терапии, мониторинга, управления информацией и поддержки принятия решений в едином аппарате, соответствующем последнему слову техники. Расширяя существующие границы анестезии, аппарат Zeus IE представляет собой знаменательную веху в развитии технологии, предлагая такой уровень интеграции систем и управления рабочими процессами, который не может обеспечить никакая другая рабочая станция. Аппарат Dräger Zeus IE дает возможность сконцентрировать внимание на пациенте, а не на управлении рабочей станцией.

ОРИЕНТАЦИЯ НА МАКСИМАЛЬНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Аппарат Zeus IE использует технологию анестезии с контролем целевых параметров (ТСА). После настройки целевых параметров, таких как концентрация выдыхаемого анестетика и процент кислорода во вдыхаемом воздухе, аппарат Zeus IE вычисляет наиболее эффективный путь достижения цели, в то время как высокоточные газоанализаторы и интеллектуальная система защиты совместно работают над обеспечением более высокого уровня безопасности пациента. ТСА можно использовать даже в сочетании

с полностью закрытым контуром, создавая таким образом мощную комбинацию, позволяющую существенно уменьшить потребление дорогих анестетиков.

БЕСКОМПРОМИССНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ

Аппарат Zeus IE позволяет достичь в операционной того же качества вентиляции, что и в отделении интенсивной терапии. Инновационная концепция турбинного вентилятора TurboVent создает практически неограниченный вдыхаемый поток независимо от режима вентиляции, обеспечивая все преимущества спонтанного дыхания и активного ПДКВ.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ИНТЕГРАЦИИ


Дополнительная интеграция инфузионных насосов и мониторинга пациента превращает аппарат Zeus IE в законченный комплекс анестезиологической станции.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИИ

Вентилятор высокой эффективности обеспечивает вентиляцию на уровне отделения интенсивной терапии, особенно с режимами поддержки спонтанного дыхания.

АНЕСТЕЗИЯ С УПРАВЛЕНИЕМ ПО ЦЕЛЕВЫМ ПАРАМЕТРАМ

Установка целевых значений концентрации кислорода во вдыхаемом воздухе₂ и концентрации выдыхаемого анестетика сводит к минимуму время и усилия, затрачиваемые на стабильное выполнение анестезии.

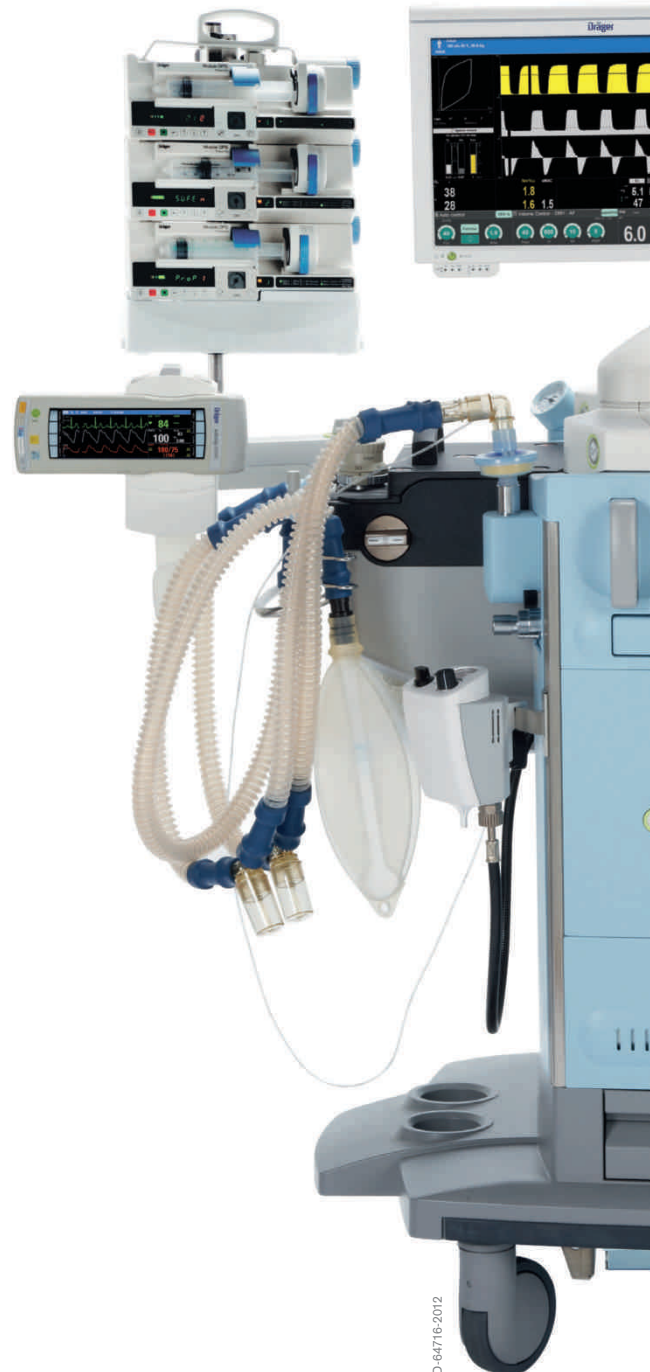



СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Использование общего пользовательского интерфейса с системой мониторинга пациента Infinity Acute Care System, другой наркозно-дыхательной техникой и аппаратами ИВЛ Dräger, снижает затраты и усилия на обучение пользователей.

ИЗМЕРИМАЯ АНЕСТЕЗИЯ

Анестезия по закрытому контуру означает, что в дыхательную систему аппарата Zeus IE подаются только те объемы свежего газа и анестетика, которые потребил пациент. Это значительно снижает расходы на анестезию, а также оптимизирует температуру смеси и уровень влажности в контуре.



В компании Dräger мы знаем, что происходящий в операционной процесс — больше, чем только операция. Подготовка, ведение документации, послеоперационные процедуры и обслуживание не менее важны. Аппарат Zeus® IE разработан для повышения периоперационной производительности, что является одним из самых важных факторов в создании наиболее рентабельной рабочей среды.

ЭРГОНОМИЧНОЕ, ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Параметры вентиляции, внутривенное введение анестезирующего препарата, доставка анестезирующего газа и мониторинг пациента наглядно визуализируются и легко управляются с одного и того же сенсорного экрана*. Четкая и интуитивно понятная общая структура меню делает управление легким и позволяет оптимизировать рабочий процесс.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ И ПОДДЕРЖКА

Доступ к исчерпывающей информации обеспечивается через систему мониторинга Infinity Acute Care System. Концепция двойного экрана позволяет получить доступ к информации без прерывания мониторинга данных витальных функций пациента. Встроенная библиотека информации о препаратах автоматически устанавливает значения по умолчанию, обеспечивает цветовое кодирование и границы дозирования.

* Только с опциями IPM и IVenus

Создайте свою собственную рабочую станцию Zeus® Infinity® Empowered



D-64717-2012

С ИНФУЗИОННЫМИ НАСОСАМИ

Благодаря дополнительному встроенному мониторингу пациента и управлению насосами аппарат Zeus IE обеспечивает монолитную интеграцию мониторинга пациента и внутривенной терапии, которые легко доступны и управляются с сенсорного экрана.



D-64718-2012

С СИСТЕМОЙ SMARTPILOT VIEW

Добавление еще одного терминала C700 для ИТ обеспечивает работу таких систем, как SmartPilot® View или PDMS, интегрированных в вашу рабочую станцию для одновременной визуализации параметров в реальном времени, а также результатов исследований или других данных, полученных из больницы сети.



D-64719-2012

С СИСТЕМОЙ МОНИТОРИНГА INFINITY ACUTE CARE SYSTEM

Новейшие решения компании Dräger в области мониторинга, такие как система мониторинга IACS Pick & Go и терминал C700 для ИТ (система SPV/PDMS), позволяют настроить аппарат Zeus IE на максимальную функциональность в плане вентиляции, терапии, мониторинга и управления информацией в единой элегантной анестезиологической рабочей станции.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://drager.nt-rt.ru> || deb@nt-rt.ru